

# Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

## Mise en route de l'Interface OPSYSWEB

VERSION 1.19 F

MyEasyOptic



## Mise en route de l'interface OPSYSWEB

### I. DÉFINITIONS :

Un bouton "Opsysweb" dans la fiche optique permet de faire apparaître une fenêtre de saisie du dossier dans Opsysweb. L'opticien peut alors compléter les produits avec les spécificités d'Essilor. Il pourra en particulier renseigner certaines mesures comme le cap de tête, ou les angles pantoscopiques.

A l'issue du paramétrage du dossier dans Opsysweb, l'opticien peut choisir soit de transmettre directement la commande de produit (bouton « Envoyer »), soit de laisser le dossier sans commande (bouton « Calculer et sauvegarder »).

Aussitôt que le choix a été effectué, MyEasyOptic va récupérer automatiquement les informations actualisées, et mettre à jour le dossier (verres, suppléments, mesures, état de la commande). Les prix de ventes des verres et suppléments sont recalculés en conséquence. Les grilles tarifaires, remises et les prix modifiés sont repris, au choix de l'utilisateur.

#### Son rôle :

La fenêtre « Opsysweb » est plus qu'un catalogue de produits, c'est aussi un calculateur et un agent de contrôle de validité des choix, en vue de transmettre des commandes de verres valides à l'unité de fabrication.

Ainsi, les produits nécessitant des informations particulières ne peuvent pas être transmis en commande si ces informations sont manquantes ou hors limites.

L'objectif de cette liaison est de lier les sources d'informations, éviter la double saisie, et aider MEO à générer des commandes plus précises, plus simplement et plus rapidement. Le travail de l'opticien est simplifié et les causes d'erreurs éliminées.

### II. CONDITIONS D'UTILISATION:

Pour que le lien soit utilisable, il y a certaines conditions à respecter :

- le lien s'utilise sur un dossier ou un devis optique,
- le lien doit être actif et paramétré (compte client Essilor, et compte Opsysweb),
- l'option « Lien Opsysweb » doit être mise en place et valide,
- le dossier optique ne doit pas être un dossier mouliné,
- les verres ne peuvent pas avoir été déjà commandés (EyesRoad ou Opsysweb),
- le dossier ne doit pas avoir fait l'objet de calculs de Tiers Payant,
- le dossier ne doit pas avoir été facturé,
- les verres doivent venir d'une sélection par l'écran de choix des verres (bouton "Loupe"), du fournisseur Essilor,
- les dossiers avec des verres choisis d'Opsysweb ne doivent partir en commande qu'avec Opsysweb. En passant quand même par EyesRoad, les commandes tomberaient en erreur, car incomplètes.
- le navigateur web doit être paramétré pour autoriser l'ouverture de fenêtre "popup" vers le site web de Opsysweb,

- les informations optiques transmises sont limitées lors de l'envoi du dossier vers Opsysweb (magasin, porteur, corrections, écarts, hauteurs, verres et suppléments), mais complètes à la récupération par MEO.

### III. UTILISATION :

#### 1. Renseigner vos codes d'accès

Dans Paramètres > Interface, cliquer sur « Opsysweb » et renseigner votre Login et Mot de passe.

4 MODULES  
1. Demande de Prise en Charge  
2. Télétransmission RO/RC  
3. Sous-traitance et Avance de frais  
4. Conventions et Grilles tarifaires

MyEasyOptic

Paramètres

Menu > Paramètres

Magasin

Raison sociale  
Ophtalmologiste  
Périphériques  
SMS  
Raccourcis clavier  
Mot(s) de passe  
Planning

Client  
Mutuelles & SS  
Stock & Verre  
Documents  
Caisse  
Interfaces  
Activisu  
Assistance

Opsysweb

	ESSILOR (ESS)	B.B.G.R (BBG)
Login	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mot de passe	<input type="password"/>	<input type="password"/>
Compte EDI (commande)	96	(absent)
Compte EDI (facturation)	96	(absent)
Compte EDI (livraison)	96	(absent)

ok

#### 2. Dossier client

Choisir un client et créer un devis optique.

4 MODULES  
1. Demande de Prise en Charge  
2. Télétransmission RO/RC  
3. Sous-traitance et Avance de frais  
4. Conventions et Grilles tarifaires

MyEasyOptic

DUPONT

Menu > Client > Saisie Vente

Par téléphone :  
0 820 220 822 ou 03 25 82 26 46

Identité : 35 ans

Mr DUPONT Leo

Lunaire 11/07/1979 Lecture

Adresse  
2 Rue de la gare

Adresse Ligne 2  
10000 Troyes

Téléphones & Mail  
Domicile 06.06.06.06.06

Informations Carte Vitale  
N°Sécu Clé Taux SS : 60 % Tiers payant  
Grand Régime : 01 Caisse Ratt. : 061 Centre Gest. : 1515 CPAM-NICE

Visite

Devis Opt

Devis Ordonnance

### 3. Sélection des verres

Commencer par paramétrer le type d'ordonnance, les écarts, les hauteurs, la monture (optionnel) et les corrections.

Sélectionner un verre Essilor (le verre attendu par le porteur).

Au retour de la sélection des verres, un bouton Opsyweb apparaît entre les zones de verres droit et gauche, en dessous de la flèche verte de report :


#### 4. L'interface OPSYSWEB

Cliquer sur ce bouton, une fenêtre apparaît par dessus le dossier optique (une spirale à points comme au lancement de MEO). Attendre quelques instants.




Puis quelques secondes plus tard, une fenêtre « popup » permettant de compléter le dossier dans "Opsysweb" apparaît.


**ATTENTION** : Il est possible que le navigateur Google Chrome bloque cette fenêtre, apparaîtra alors ce bouton :  sur la barre en haut à droite :

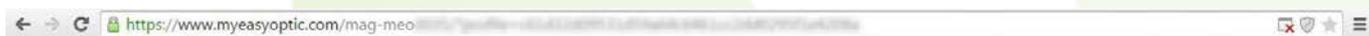

Il suffit de cliquer dessus et de cocher «**Toujours afficher les fenêtres pop-up de www.myeasyoptic.com** ».

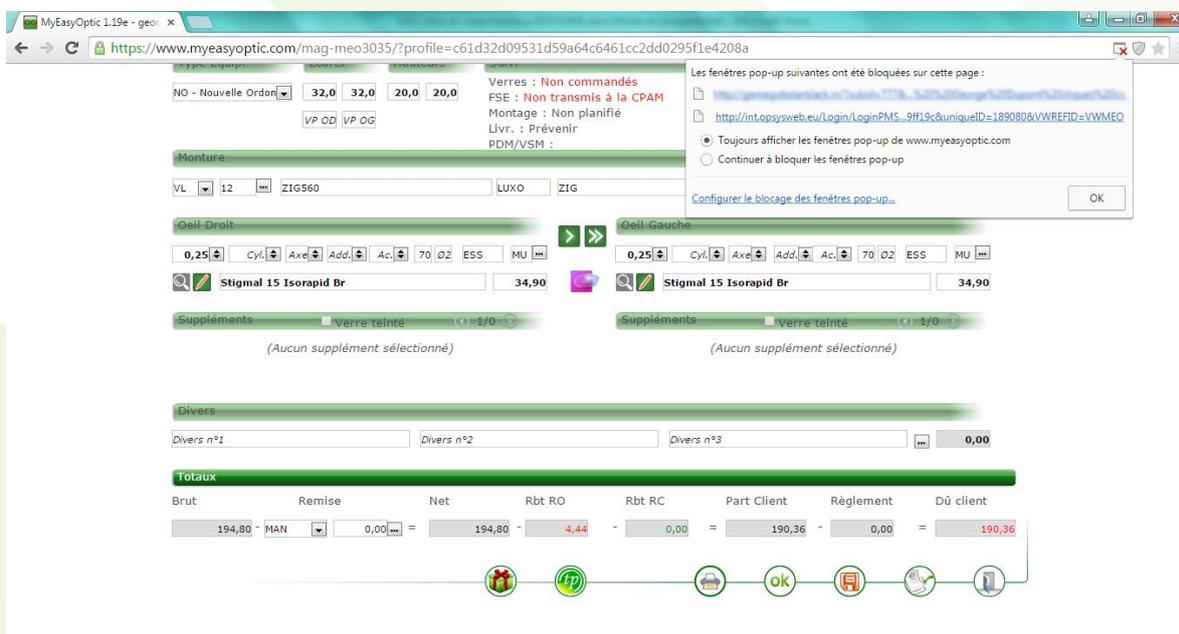


L'interface Opsyweb indique qu'elle charge les informations.

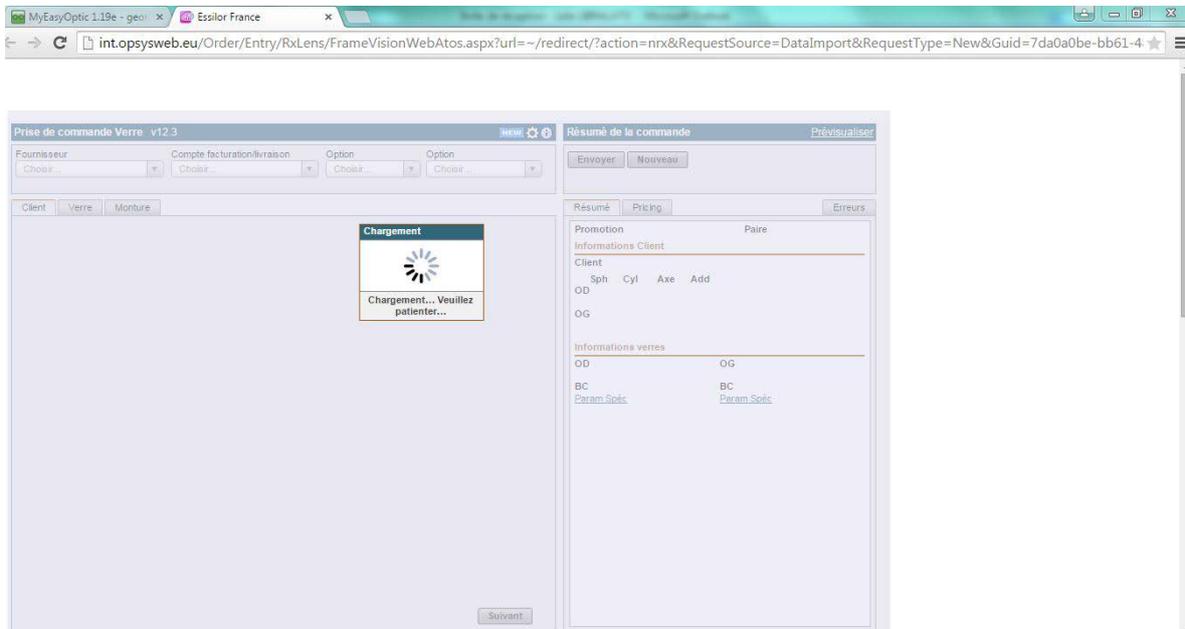


Note : pendant la saisie du dossier, MEO reste en « attente » du retour Opsysweb. Ne pas toucher à cette fenêtre.

Choisir la version de catalogue verre, et le compte opticien.

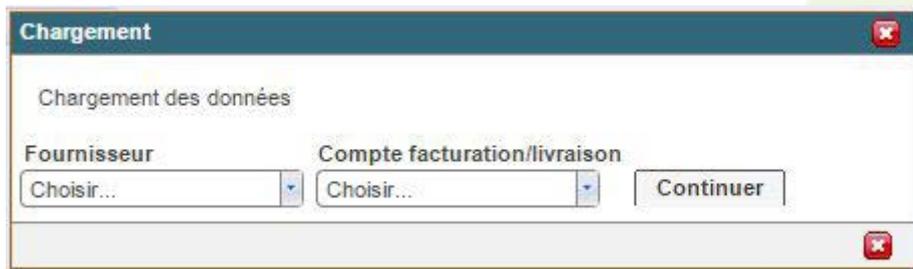

Puis compléter le choix des produits, et leurs paramètres. Le résumé de la commande apparaît sur la droite :

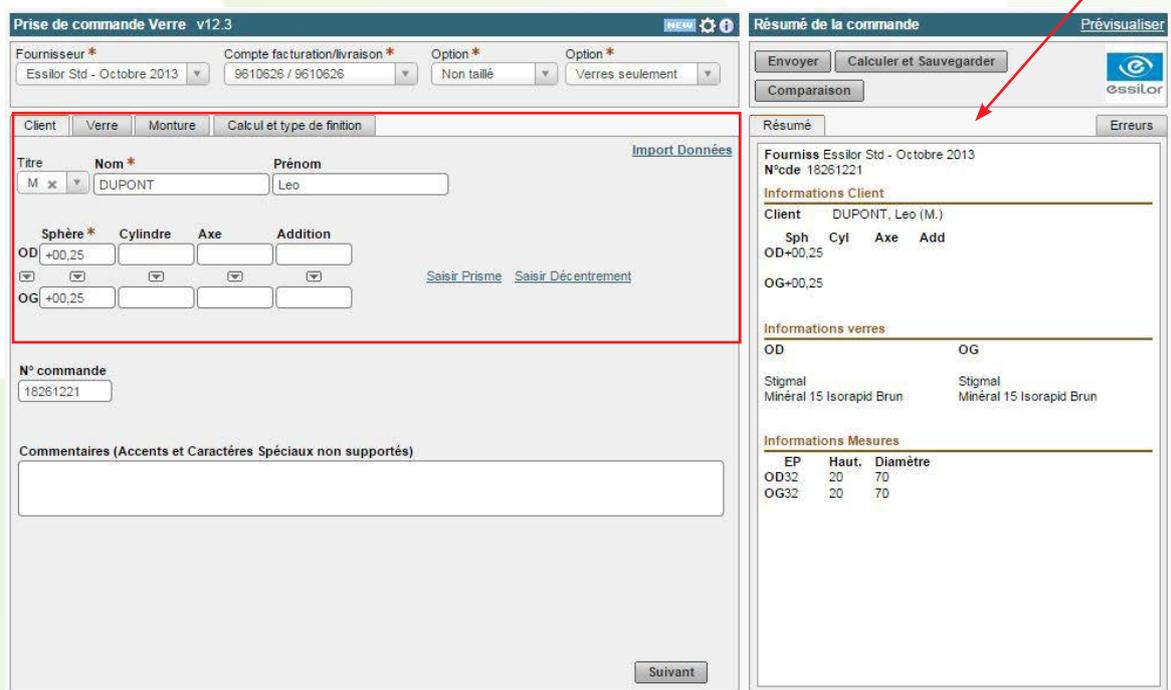

Une fois complétée, utiliser l'un des boutons « **Envoyer** » ou « **Calculer et sauvegarder** ».

### Prise de commande Verre v12.3

Fournisseur \* Essilor Std - Octobre 2013  
 Compte facturation/livraison \* 9610626 / 9610626  
 Option \* Non taillé  
 Option \* Verres seulement

Client Verre Monture Calcul et type de finition

Titre M x Nom \* DUPONT Prénom Leo

Sphère \* OD +00,25  
 Cylindre OD  
 Axe OD  
 Addition OD

N° commande 18261221

Commentaires (Accents et Caractères Spéciaux non supportés)

Suivant

### Résumé de la commande

Envoyer Calculer et Sauvegarder

Résumé

Fourniss Essilor Std - Octobre 2013  
 N°cde 18261221

Informations Client  
 Client DUPONT, Leo (M.)  
 Sph Cyl Axe Add  
 OD+00,25

OG+00,25

Informations verres

OD	OG
Stigmal Minéral 15 Isorapid Brun	Stigmal Minéral 15 Isorapid Brun

Informations Mesures

	EP	Haut.	Diamètre
OD32	20	70	
OG32	20	70	

>> En cliquant sur « Envoyer », la commande de produits est transmise à l'usine Essilor, **elle va rester dans une "zone d'attente" de 30 minutes, pour avoir un délai d'annulation (par téléphone au support Essilor) si besoin.**

il est possible d'imprimer le récapitulatif de la commande :

### Détails commande

Imprimer Voir en taille réelle pour l'impression

N° commande: SPS3MSG  
 Nom de l'utilisateur: ESFR#9610626  
 Date d'envoi: 06/06/2015  
 Dernière mise à jour:  
 Option: Non taillé

Compte de facturation: #51719610626  
 6601 RR 2222 400  
 Austin, TX 76730 US

Compte de livraison: #51719610626  
 6601 RR 2222 400  
 Austin, TX 76730 US

Option Monture: Verres seulement Fournisseur: Essilor Std - Octobre 2013

Informations Client  
 Nom Client: DUPONT, Leo (M.)

Sphère	Cylindre	Axe	Addition	EP	Hauteur segment	Hauteur
OD +00,25				32	20	25
OG +00,25				32	20	25

N° commande: 18261221

Informations Verre

	Gamme	Produit	Version	Autres traitements	Traitements autres verres
OD	Unifocal	Stigmal	Minéral 15 Isorapid Brun Chrono		
OG	Unifocal	Stigmal	Minéral 15 Isorapid Brun Chrono		

Informations Forme

	Precal	Type ép.
OD	Non	Ep. calculée
OG	Non	Ep. calculée

Visualisation

Informations Calcul

	Epaisseur mini	Angle ép. mini	Distance centre-ép. mini	Epaisseur maxi	Angle ép. maxi	Distance centre-ép. maxi	Ep. Centre	Poids	Base calculée
OD	1,96	0	32,5	1,96	0	32,5	2,2	18,0	5,25
OG	1,96	180	32,5	1,96	180	32,5	2,2	18,0	5,25

Détails Diamètre

	Source Calcul	Diamètre mini calc.	Diamètre Com. Calc.	Diamètre physique	Diamètre commercial
OD	Rxcp	65	65	65	65
OG	Rxcp	65	65	65	65

Imprimer

## Variante avec le choix du bouton « **Calculer et sauvegarder** ».

La commande n'est pas transmise à l'usine, le dossier est récupéré de la même façon, mais on ne propose pas à l'opticien de transformer le devis.

(Quand l'opticien le souhaitera, il transformera le devis en vente, et pourra demander la transmission de la commande Opsysweb : en allant au menu « mes commandes ». Tous les dossiers en attente de commande Opsysweb sont visibles, mais « bloqués » par défaut. Il suffit de les débloquer (verres droit ET gauche), et d'utiliser le bouton « Commandé ».)

## 5. Retour sur MEO

MEO détecte la fin de la saisie sur Opsysweb, et va contacter le serveur pour récupérer la nouvelle version du dossier.

Puis il va actualiser le dossier, le prix des verres apparaît automatiquement...

PDM/VSM : Opsysweb

Monture

VL 12 ZIG560 LUXO ZIG Rose 52 12 MFM 125,00

Oeil Droit

0,25 Cyl. Axe Add. Ac. 65 Ø2 ESS MU

Stigmal 15 Isorapid Br Chrono 23,60

Oeil Gauche

0,25 Cyl. Axe Add. Ac. 65 Ø2 ESS MU

Stigmal 15 Isorapid Br Chrono 23,60

Suppléments

Verre teinté 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Totaux

Brut	Remise	Net	Rbt RO	Rbt RC	Part Client	Règlement	Dû client
172,20	MAN 0,00	= 172,20	- 4,44	- 0,00	= 167,76	- 0,00	= 167,76

ok

.. et la zone « Suivi » s'est mise à jour :

Visite

Vente Opt x Devis Opt (T) x +

Vente Ordonnance

08/06/2015 N° Facture Adulte 08/06/2015 CAHI CAHIZA 99999999 8 15 Générer la FS

Équipement vendu par George D

Type Equip. Ecart. Hauteurs Suivi Observations

NO - Nouvelle Ordon 32,0 32,0 25,0 25,0

VP OD VP OG

Verres : Non commandés  
FSE : Non transmis à la CPAM  
Montage : Non planifié  
Liv. : Prévenir  
PDM/VSM : Opsysweb

Monture

VL 12 ZIG560 LUXO ZIG Rose 52 12 MFM 125,00

Oeil Droit

0,25 Cyl. Axe Add. Ac. 65 Ø2 ESS MU

Stigmal 15 Isorapid Br Chrono 23,60

Oeil Gauche

0,25 Cyl. Axe Add. Ac. 65 Ø2 ESS MU

Stigmal 15 Isorapid Br Chrono 23,60

Suppléments

Verre teinté 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Si c'est un devis, MEO va proposer à l'opticien de le transformer en vente.

## 6. Les commandes «Par Opsysweb»

Les commandes passées par Opsysweb sont visibles dans CLIENT > Mes commandes.



La liste « A commander » apparaît.

La colonne « Etat » précise si la commande a été faite par Opsysweb :

The screenshot shows the 'Commandes' section of the MyEasyOptic interface. A table lists orders with columns for Nom, Prénom, Date, Four., Bloqué, Article, Détail, Ø, and Etat. A red arrow points to the 'Etat' column, highlighting the status of each order.

Nom	Prénom	Date	Four.	Bloqué	Article	Détail	Ø	Etat
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input type="checkbox"/>	OD: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,75(0,50)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input type="checkbox"/>	OG: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,50(0,75)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input type="checkbox"/>	OD: Anti Fatigue Orma Trio Clean	-0,25(0,25)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input type="checkbox"/>	OG: Anti Fatigue Orma Trio Clean	-0,50(0,50)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,25(0,00)0°	65	<a href="#">par OpsysWeb</a>
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,25(0,00)0°	65	<a href="#">par OpsysWeb</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input type="checkbox"/>	OD: Advans Fit Ormix Optifog	-0,75(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input type="checkbox"/>	OG: Advans Fit Ormix Optifog	-0,75(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>

Les commandes faites par Opsysweb sont cochées et bloquées.

Pour les passer en commande, il suffit de les décocher (ne pas oublier de cocher les autres commandes pour les bloquer).

Commandes

Menu > Commandes

A commander Mes commandes

Recherche Nom Prénom 1 / 1

Nom	Prénom	Date	Four.	Bloqué	Article	Détail	Ø	Etat
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,75(0,50)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,50(0,75)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Anti Fatigue Orma Trio Clean	-0,25(0,25)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Anti Fatigue Orma Trio Clean	-0,50(0,50)0°	75	<a href="#">A commander</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Advans Fit Ormix Optifog	-0,75(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Advans Fit Ormix Optifog	-0,75(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input type="checkbox"/>	OD: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,25(0,00)0°	65	par OpsysWeb
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input type="checkbox"/>	OG: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,25(0,00)0°	65	par OpsysWeb

Puis cliquer en bas à droite sur le bouton « Commander »

Un message apparaît, cliquer sur « Oui » après avoir vérifié les informations :

Commandes

Menu > Commandes

A commander Mes commandes

Recherche Nom Prénom 1 / 1

Nom	Prénom	Date	Four.	Bloqué	Article	Détail	Ø	Etat
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,75(0,50)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUFOUR	Jeannine	07/12/2011	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Exceptio Stylis Crizal Forte	0,75(0,75)0°	70	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Anti Fatigue Orma Trio Clean	(0,25)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	07/03/2012	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Anti Fatigue Orma Trio Clean	(0,50)0°	75	<a href="#">A commander</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OD: Advans Fit Ormix Optifog	(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>
GED	Ge	29/04/2013	ESS	<input checked="" type="checkbox"/>	OG: Advans Fit Ormix Optifog	(0,75)0°	75	<a href="#">A commander</a>
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input type="checkbox"/>	OD: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,00)0°	65	par OpsysWeb
DUPONT	Leo	08/06/2015	ESS	<input type="checkbox"/>	OG: Stigmal 15 Isorapid Br Chrono	0,00)0°	65	par OpsysWeb

**Information importante**

ATTENTION ! Voulez-vous vraiment commander 2 verres ?  
08/06/2015:Verre OD:DUPONT-Leo  
08/06/2015:Verre OG:DUPONT-Leo

oui
non


Une fenêtre vient confirmer la(les) commande(s) :

**Information**


Nombre de nouvelle(s) commande(s) : 1

ok

Les commandes passées apparaîtrons dans l'onglet « Mes commandes ». L'Accusé de Réception est visible dans la colonne « Etat ».

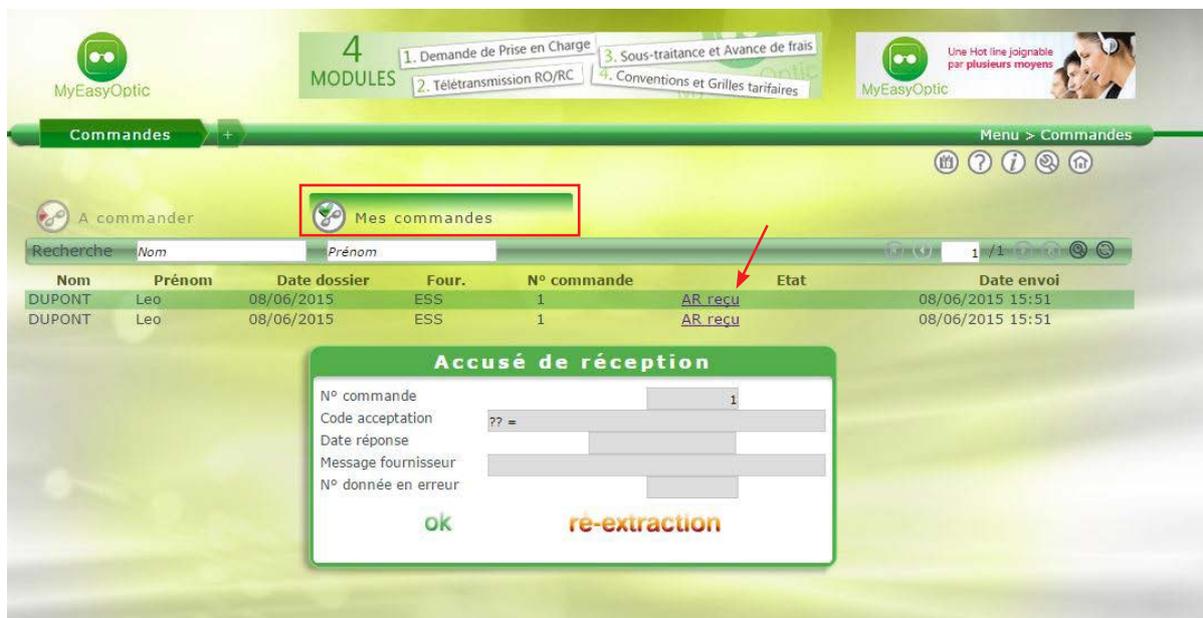

A noter que le suivi de la vente s'est actualisé :

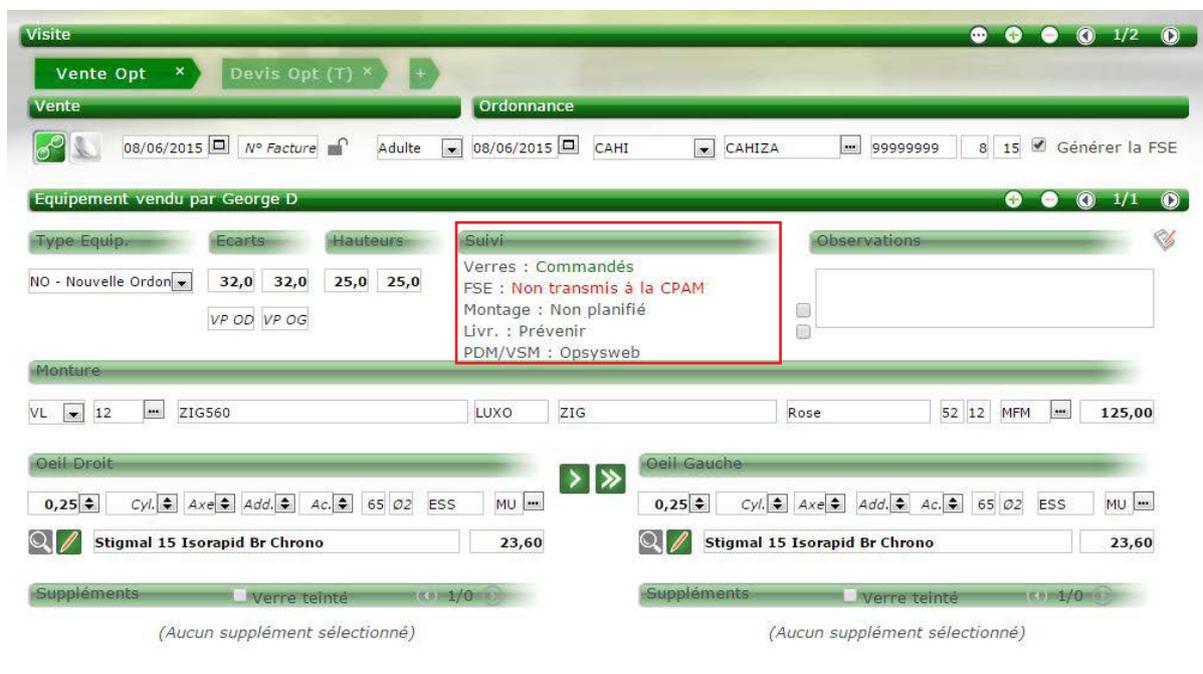

#### IV. EN CAS D'ERREUR

En cas d'erreur, l'utilisateur peut demander à transmettre une nouvelle fois le dossier. Une confirmation est nécessaire.

Attention, il faut considérer que c'est une nouvelle saisie « incomplète », comme pour le tout premier envoi (toutes les infos ne seront pas renvoyées) de MEO à Opsysweb.

>> C'est à dire que certaines informations sont reprises directement par l'interface Opsysweb lors la commande (verres, sphères, diamètre...) et d'autres sont à renseigner directement dans l'interface (mesures...). **Lors d'un second envoi suite à une erreur, ces informations seront à ressaisir.**