

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Interface Zeiss Easyplug

VERSIONS 1.40

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation : Interface Zeiss Easyplug

Prérequis : Avoir le programme MyEasyLocalService d'installé, et en version 1.19 minimum

Utilisation : Sur le dossier, des verres CZV sont obligatoirement nécessaires.

Une fois le choix des verres fait, un bouton « ZEISS » apparaît à l'endroit habituel pour les interfaces

A l'ouverture d'EasyPlug, selon les options sélectionnées dans MEO, les cases « Pré-Calibrage » et/ou « Télé-Détourage » peuvent être pré-cochées.

Clique simplement sur le bouton valide en bas à droite

La fenêtre EasyPlug s'ouvre avec le nom de client de renseigné

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Données Référence : TEST Zeiss

Formes

A 0.0 B 0.0 Nez 0.0

G 0.0 0.0

Centrages

Ecart 0.0 Hauteur 0.0

Paramètres d'individualisation

FrameFit DVO Galbe Panto. Dist. Lect. Initiales M.I.D

Time Delay Profil Vis. B N I

1-FORME 2-DETOURAGE 3-VALIDATION PRE-CALIBRAGE

Star icon, Glasses icon, Upload icon, Hand icon

Renseigner les écarts, les hauteurs et le nez si cela n'a pas été fait dans MEO

Cliquer sur le bouton en forme d'étoile

Puis sélectionner une forme type (celle-ci peut provenir d'une bibliothèque de formes type, ou d'une bibliothèque de formes palpées en magasin)

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Données Référence : TEST Zeiss

Formes

A 0.0 B 0.0 Nez 18

G 0.0 0.0

Centrages

Ecart 32 Hauteur 20

Paramètres d'individualisation

FrameFit DVO Galbe Panto. Dist. Lect. Initiales M.I.D

Time Delay Profil Vis. B N I

1-FORME 2-DETOURAGE 3-VALIDATION PRE-CALIBRAGE

Star icon, Glasses icon, Upload icon, Hand icon

Forme Type

Forme Magasin

Forme Type 1, Forme Type 2, Forme Type 3, Forme Type 4, Forme Type 5, Forme Type 6, Forme Type 7, Forme Type 8, Forme Type 9, Forme Type 10, Forme Type 11, Forme Type 12, Forme Type 13, Forme Type 14, Forme Type 15, Forme Type 16

Le résumé de la sélection s'affiche

Cliquer ensuite sur le bouton en forme de flèche à gauche

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Cliquer sur le bouton en forme d'engrenage pour lancer le calcul

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Le calcul s'effectue...

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Données Référence : TEST Zeiss

Formes

	A	B	Nez
D	48.0	35.0	18.0
G	48.0	35.0	

Centrages

	Ecart	Hauteur
D	32.0	20.0
G	32.0	20.0

Paramètres d'individualisation

	FrameFit	DVO	Galbe	Panto.	Dist. Lect.	Initiales	M.I.D
D							
G							

Time Delay: Profil Vis.:

1-FORME ☒ 2-DETOURAGE ☐ 3-VALIDATION ☐ PRE-CALIBRAGE

En cours ...


Produit: 922907 55 60 65 70 75

SPH: -0.5 OPTIMA / VSM Décentrement

CYL: Bord H V

AXE: Centre Prisme

ADD: Pt Perc. L A



Ensuite, le résultat du calcul apparait à l'écran

Cliquer sur le bouton en forme de coche

EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Données Référence : TEST Zeiss

Formes

	A	B	Nez
D	48.0	35.0	18.0
G	48.0	35.0	

Centrages

	Ecart	Hauteur
D	32.0	20.0
G	32.0	20.0

Paramètres d'individualisation

	FrameFit	DVO	Galbe	Panto.	Dist. Lect.	Initiales	M.I.D
D							
G							

Time Delay: Profil Vis.:

1-FORME ☒ 2-DETOURAGE ☐ 3-VALIDATION ☐ PRE-CALIBRAGE

OK

Produit: 922907 55 60 65 70 75

SPH: -0.5 OPTIMA / VSM Décentrement

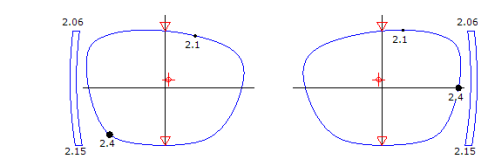
CYL: Bord H V

AXE: Centre Prisme



ADD: Pt Perc. L A

Bord_Min Centre Bord_Max

	Bord_Min	Centre	Bord_Max
D	2.10	2.00	2.40
G	2.10	2.00	2.40



EasyPlug by ZEISS Client (Version : 1.5.4.1, Date : 05/06/2018, Mode : PMS)

Les mesures spécifiques retournées par Easyplug sont visibles dans MyEasyOptic en cliquant sur le bouton , puis sur le bouton 

Dans le suivi du dossier, l'ajout d'une indication permet signaler l'utilisation de l'interface EasyPlug sur ce dossier.

L'icône indique la présence d'un fichier de forme.

C'est aussi vérifiable dans le détail de l'équipement

Détail d'un dossier optique

Client

Nom : EASYPLUG Prénom : Test Date vente : 25/01/2021 N° Equipement : 13420

Type de vision Ecart Hauteurs

VL VL 32,0 32,0 VP OD OG 20,0 20,0

Oeil Droit : 102672 Oeil Gauche : 102672

Sphère : -0,75 Diamètre : 60 Fournisseur : CZV Type : OU sync UF AS 15 HB

Sphère : -0,75 Diamètre : 60 Fournisseur : CZV Type : OU sync UF AS 15 HB

Suppléments

Type	Libellé	Oeil droit	Oeil gauche
antireflet	HMC Blue UV	Ok [HB]	Ok [HB]

Lors d'une commande d'un dossier ayant utilisé l'interface Easyplug, le fichier EDI et le fichier forme OMA sont zippés ensemble pour être envoyés en même temps dans la même commande.