

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Interface MEGACONNECT

VERSIONS 1.48

MyEasyOptic




Manuel d'utilisation : Interface MEGACONNECT

Prérequis :

MyEasyLocalService 1.27 minimum


Paramétrages :

Renseigner l'identifiant du magasin en PARAMETRES / INTERFACES / NOVASOFT MEGACONNECT :

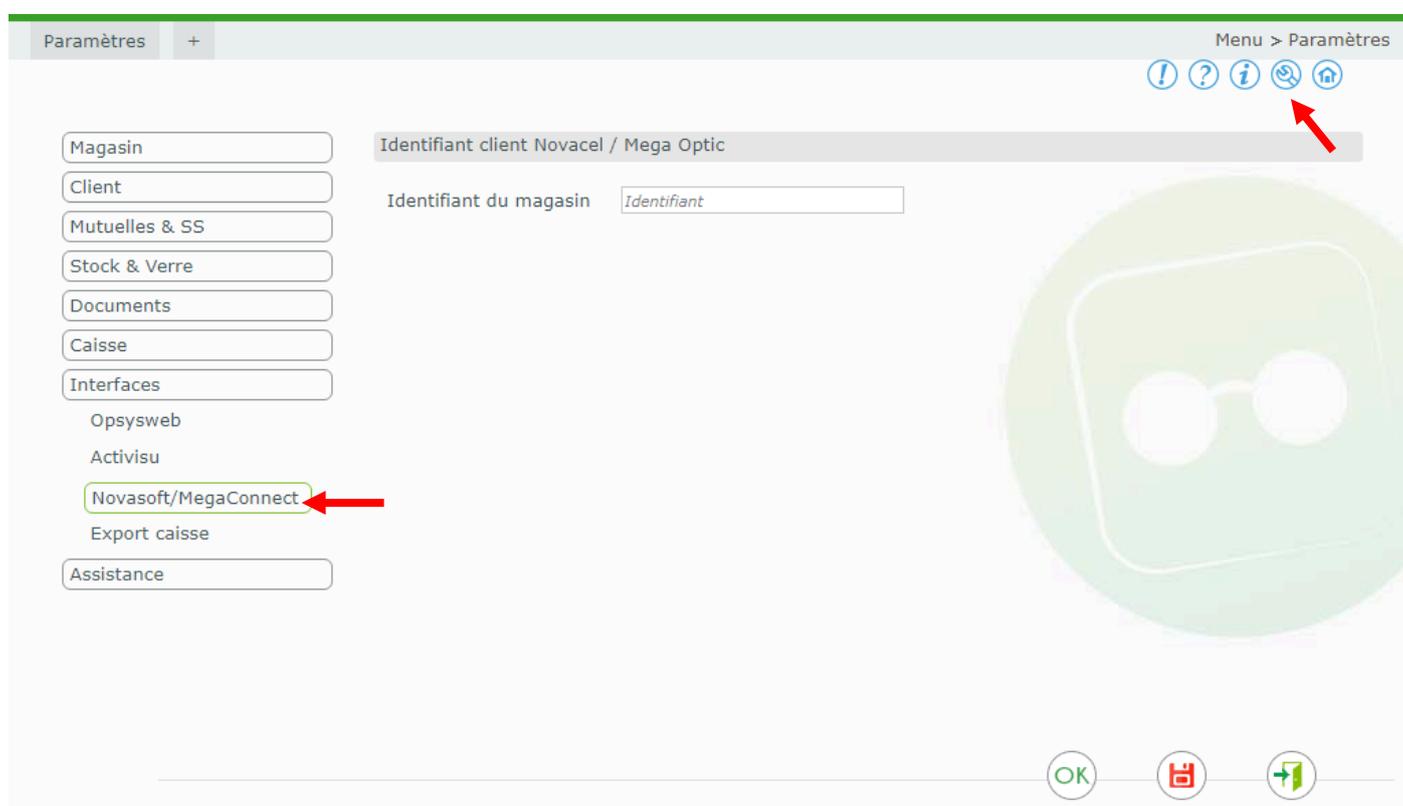

Utilisation :

Sur le dossier sélectionner des verres MEGACONNECT (MEG) puis cliquer sur le bouton  :

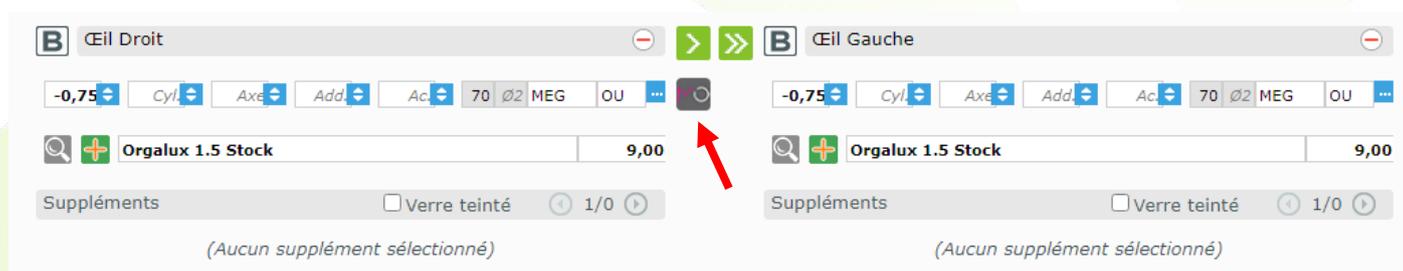

Le programme MEGACONNECT s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur :

The screenshot shows the MEGACONNECT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, a shopping cart icon labeled 'Mes commandes', and a user profile 'Bienvenue 88984'. Below this is a header with filters for 'Etat' (Saisie), 'Type' (Verre), and 'Période' (24/05/2020 - 26/06/2020). The main area contains a table of orders with columns: Id, Date, Ref Client, Ref Porteur, Produit, Prescription, Livré à, and Etat. A red arrow points to the 'MEGACONNECT test' entry in the 'Ref Porteur' column. To the right of the table is a vertical sidebar with buttons: Selection (1), Visualiser, Dupliquer, Modifier, Calcul, Vers saisie, Panier, Commander, and Supprimer.


Id	Date	Ref Client	Ref Porteur	Produit	Prescription	Livré à	Etat
5230673	25/08/2020 08:23	2715	MEGACONNECT test	Orgalux 15 Stock;	-0.75 0.00 0 0.00 / -0.75 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5229106	24/08/2020 15:25	2714		OrgalIndividual 15;	-1.00 0.00 0 0.00 / -1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5225425	23/08/2020 15:13	1		OrgalIndividual 15;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5224689	23/08/2020 13:25	1		OrgalIndividual 15 MRA;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5213422	18/08/2020 18:42	2704		Orga 15 Conduite Jaune AB Durci;	-0.75 0.00 0 0.00 / -0.75 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5213388	18/08/2020 16:18	2704		OrgalIndividual 15 Drive Durci;	-1.00 0.00 0 0.00 / -1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5213272	18/08/2020 18:17	310		EsPrix UF 1.67 AR;	1.00 0.00 0 0.00 / 1.00 0.00 0 0.00	88984	Saisie
5171435	03/08/2020 17:23	2		3DHDNG 15 MRUV;	1.00 0.00 0 1.00 / 1.00 0.00 0 1.00	88984	Saisie incomplète
5167616	02/08/2020 15:24	1		3DHDNG 15;	1.00 0.00 0 1.00 / 1.00 0.00 0 1.00	88984	Saisie

Sélectionner et compléter le dossier. Pour l'exemple, un précal va être ajouté.


The screenshot shows the 'Verre' configuration screen in the MEGACONNECT application. At the top, there is a navigation bar with the logo, a shopping cart icon labeled 'Verre', and a user profile 'Bienvenue 88984'. Below this is a header with icons for 'PRESCRIPTION', 'TYPE DE COMMANDE', 'VERRE', and 'TRAITEMENT'. The main area contains a 'Dupliquer' button and two columns of options for 'Droit' and 'Gauche'. Each column has radio buttons for 'Tout', 'Antireflet', 'Durci', 'Coloration', and 'Autre'. Below these are checkboxes for 'Base bombée' (00.00) and 'Base plate'. Search dropdowns are present for both sides, with 'Ajouter' and 'Supprimer' buttons. A red arrow points to the 'Precalibre' option in the 'Gauche' search dropdown.

Pour compléter le calcul du précal une forme est nécessaire.

Pour cela, charger/dessiner la forme de la monture.

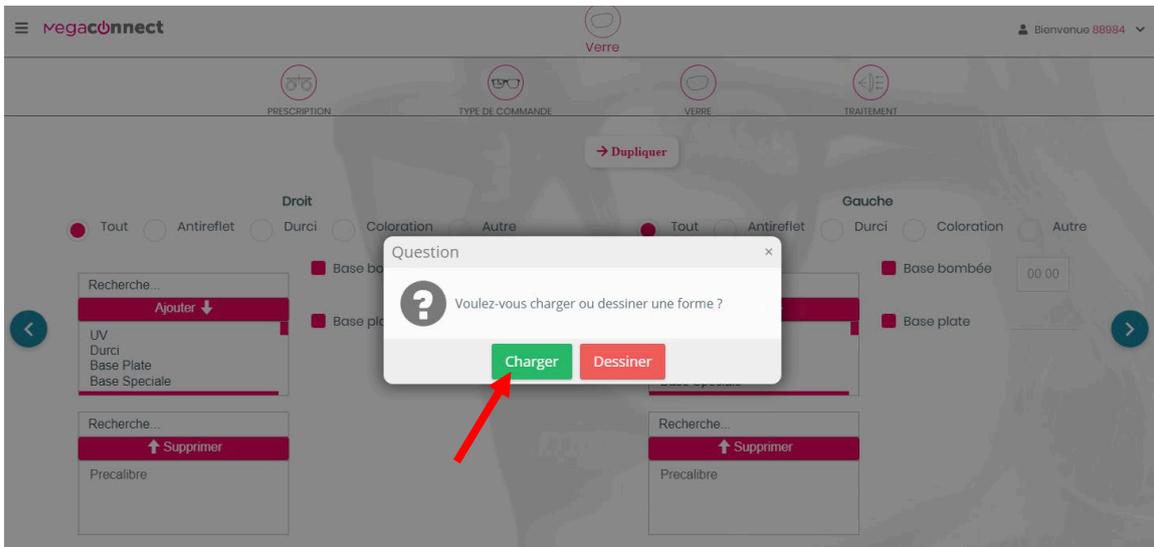

Puis :

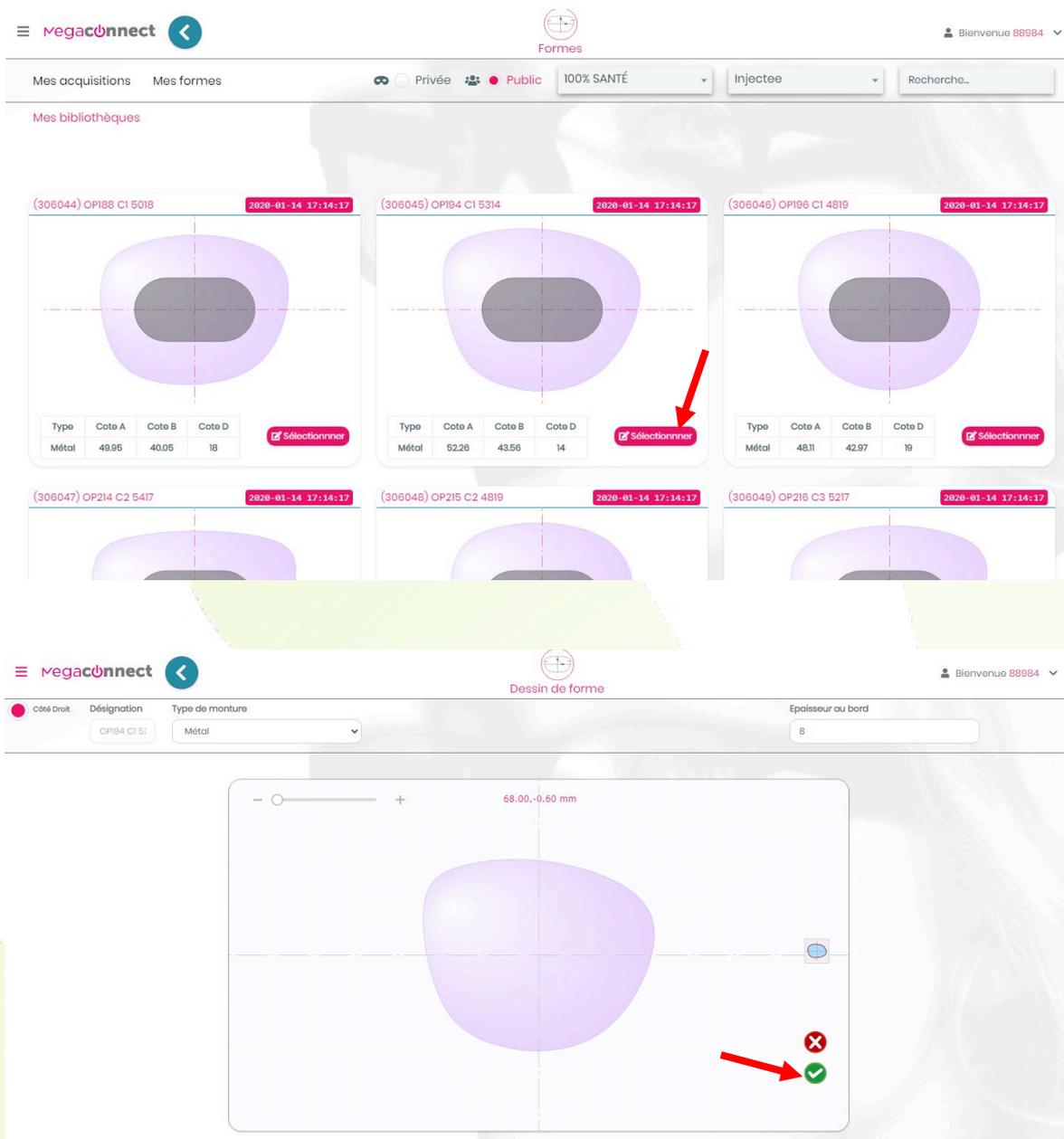

Compléter les écarts et hauteurs, puis cliquer sur « **Enregistrer** » :

Cotes Monture

Cote A	Cote B	Cote D
52.26	43.56	14

Cotes Montage

Droit		Gauche	
Écart VL		Écart VL	
30.00		30.00	
Hauteur VL		Hauteur VL	
20.00		20.00	
Diamètre		Diamètre	
65/70		65/70	

Enregistrer **Annuler**

Une fois enregistré sur MEGACONNECT, de retour sur MyEasyOptic, répondre OK à la question : « **Voulez-vous récupérer les modifications ?** »

Novasoft / Megaweb

La prescription a été transmise avec succès:
Voulez-vous récupérer les modifications?

ok **annuler**

Le dossier a été complété avec le supplément « précalibre ».
Les valeurs additionnelles sont disponibles en cliquant sur le bouton .

Œil Droit **Œil Gauche**

Office HD 1.5 Deg 0.75 MRB 121,00

Suppléments Verre teinté 1/1

MRB 0,00
Précalibre 0,00

Puis sur le bouton .

Détail d'un dossier optique

Client

Nom : MEGACONNECT Prénom : test Date vente : 25/06/2020 N° Equipement : 12550

Type de vision : VL Ecart : VL 30,0 30,0 VP 0,0 0,0 Hauteurs : 20,0 20,0 Fichier de forme : Fichier de forme non présent

Oeil Droit : 800124 Oeil Gauche : 800124

Sphère : -0,75 Cylindre : (+0,00) 0° Add. : 0,00
Diamètre : 65/70 Fournisseur : MEG Type : OM
Office HD 1.5 Deg 0.75 MRB

Sphère : -0,75 Cylindre : (+0,00) 0° Add. : 0,00
Diamètre : 65/70 Fournisseur : MEG Type : OM
Office HD 1.5 Deg 0.75 MRB

Suppléments

Type	Libellé	Oeil droit	Oeil gauche
antireflet precalibrage / precalibrage	MRB Precalibre	Ok [274] Détails	Ok [274] Détails

Paramètres liés aux suppléments spéciaux

Décentrement : Personnalisé Précalibrage Prisme

Oeil droit Oeil gauche

Boxing A	52,26 mm	Boxing A	52,26 mm
Boxing B	43,56 mm	Boxing B	43,56 mm
Boxing E	mm	Boxing E	mm
Boxing D	14,00 mm	Boxing D	14,00 mm
Forme type	1	Forme type	1
Epaisseur mini au bord	1/10 mm	Epaisseur mini au bord	1/10 mm
Epaisseur au centre d'un précal	1/10 mm	Epaisseur au centre d'un précal	1/10 mm

ok annuler

NB : Avertissements pouvant apparaître à l'aller et/ou au retour de MEGACONNECT:

A l'envoi vers MEGACONNECT:

Si le dossier est déjà facturé, l'envoi vers MEGACONNECT sera effectué mais un avertissement indique qu'il n'y aura aucun retour vers MyEasyOptic :

Information

Les informations retournées par MEGACONNECT ne seront pas intégrées du fait d'une des causes suivantes :

- Votre dossier est facturé
- Votre dossier est commandé

Information avant envoi MEGACONNECT

ok

Si le dossier contient une Demande de PEC, l'envoi vers MEGACONNECT sera effectué mais un avertissement indique que, selon les modifications apportées dans MEGACONNECT, les informations pourraient ne pas être réimportées au retour dans MyEasyOptic. En effet, si dans MEGACONNECT les produits sont amenés à être changés (matière, géométrie, verres, suppléments...), ces modifications pourraient avoir un impact sur les prix, et donc sur le calcul du Tiers Payant et sa PEC.

Dans ce cas, ces changements ne seront pas reportés dans MyEasyOptic :

Information

Des informations sont susceptibles de ne pas être intégrés au retour de MEGACONNECT pour cause de présence d'une prise en charge.

ok

Au retour vers MyEasyOptic :

Si un supplément a été ajouté ou supprimé dans MEGACONNECT, lors du retour dans MyEasyOptic les informations seront bien mises à jour, mais un message sera affiché demandant de vérifier le TP et la PEC.

Information importante

Les suppléments ont changé. Veuillez contrôler le tiers payant et la prise en charge.

ok

Si le verre et la géométrie ont changé, et qu'un Tiers Payant/PEC était en cours, alors ce message va apparaître invitant à re-sélectionner les verres et refaire le calcul TP :

Information importante

Les informations retournées par MEGACONNECT n'ont pas pu être intégrées au dossier pour cause d'une différence trouvée entre les articles envoyés et reçus.

Veuillez resélectionner les verres et recalculer le tiers payant.

ok