

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Interface Activisu

VERSION 1.2025.5

MyEasyOptic



SOMMAIRE


I. Avant installation	3
II. Paramétrage	3
III. Utilisation	4

I. Avant installation

Avant l'installation dans MyEasyOptic, Activisu (IVS/Essilor) doivent intervenir pour installer la borne et le mode de compatibilité avec MyEasyOptic.

II. Paramétrage

Pour activer l'interface Activisu, cliquez sur [Paramètres](#) > [Interfaces](#) > [Activisu](#) :

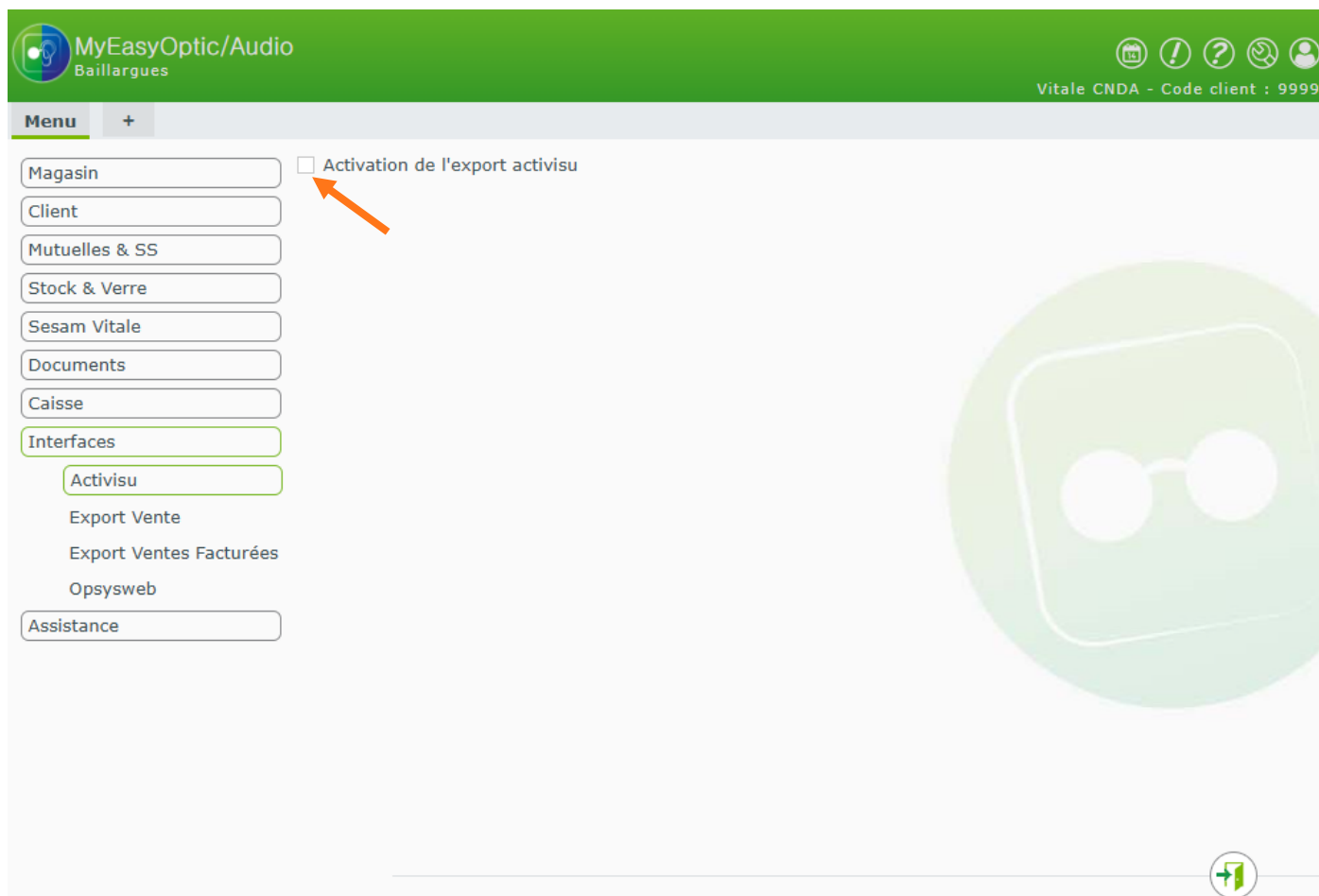

Quand vous cochez la case, un message de confirmation s'affiche :



Tous les chemins se mettent par défaut :

Menu +

Magasin

Client

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Activisu

Export Vente

Export Ventes Facturées

Opsysweb

Assistance

☒ Activation de l'export activisu

Activisu

Nom réseau (ou adresse IP) du serveur Activisu

Nom du domaine réseau

Utilisateur du domaine

Mot de passe de l'utilisateur

Répertoire partagé d'entrée des flux OMA (Exemple : 'pms_in')

Répertoire partagé de sortie des flux OMA (Exemple : 'pms_out')

Répertoire de l'application IVS (Exemple : 'c:/ivs/')

file:C:/ivs/completeData/oma/

Nom du domaine réseau

Utilisateur du domaine

Mot de passe de l'utilisateur

in/

out/

c:/ivs/

OK

III. Utilisation

Une fois les verres et corrections renseignés sur votre équipement, le bouton  Activisu apparaît : vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour lancer la récupération.

Monture

Réf. Modèle Fabricant Fournisseur Marque Coloris Ca Ne Type PV Montur

Œil Droit Utilisation corrections ophtalmo

Sph. Cyl. Axe Add. Ac. Ø1/Ø2 Four. Type

Libellé Verre Œil Droit PV Verre

Suppléments (Aucun supplément sélectionné)

Œil Gauche Utilisation corrections ophtalmo

Sph. Cyl. Axe Add. Ac. Ø1/Ø2 Four. Type

Libellé Verre Œil Gauche PV Verre


Suppléments (Aucun supplément sélectionné)

Cela a pour but de lancer Visioffice X, Eyepartner, Expert 4 ou 5, etc..., c'est à dire le logiciel correspondant à la borne.


Exemple avec le logiciel Expert 4 d'Activisu qui se lance alors sur votre écran :



Sélectionnez la prise de mesure à importer nommée "No name XXX" par défaut, puis validez avec le bouton « Suivant ».

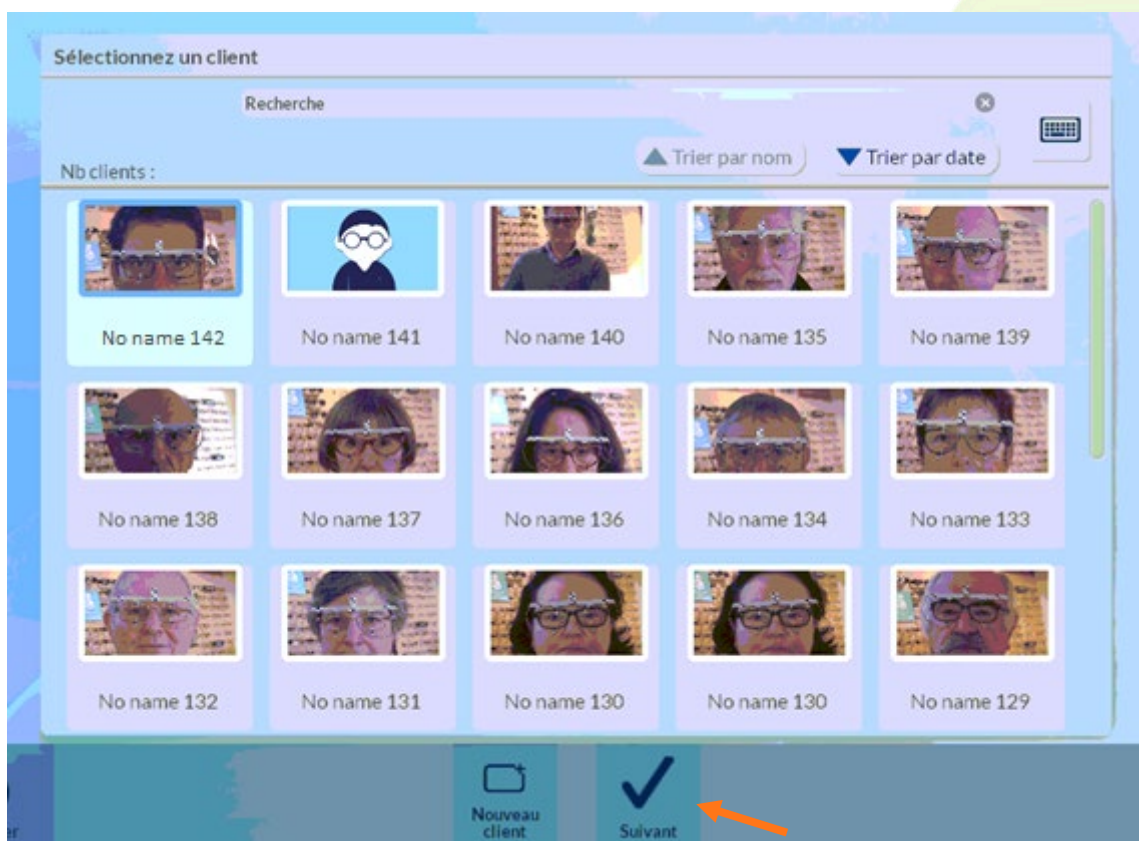


Sélectionnez l'équipement à importer, puis validez à nouveau avec « Suivant ».

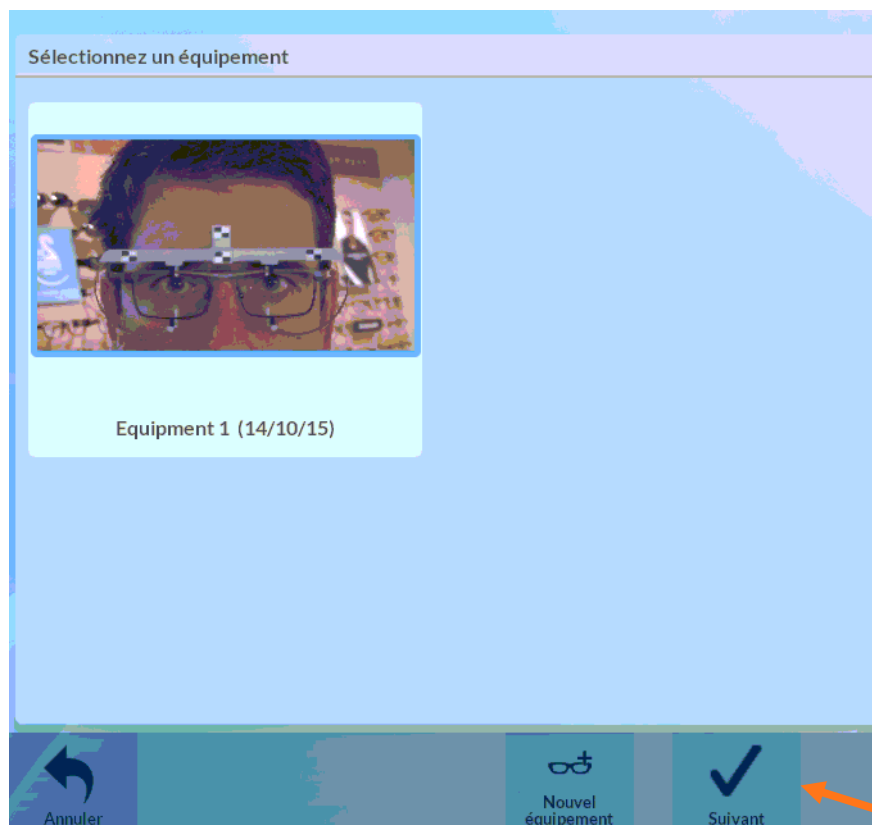

L'équipement sélectionné s'affichera et toutes les données dans Activisu seront mises à jours avec celles présentes dans MyEasyOptic (Nom, Prénom, Adresse, etc...).

Cliquez ensuite sur le bouton « Export ».

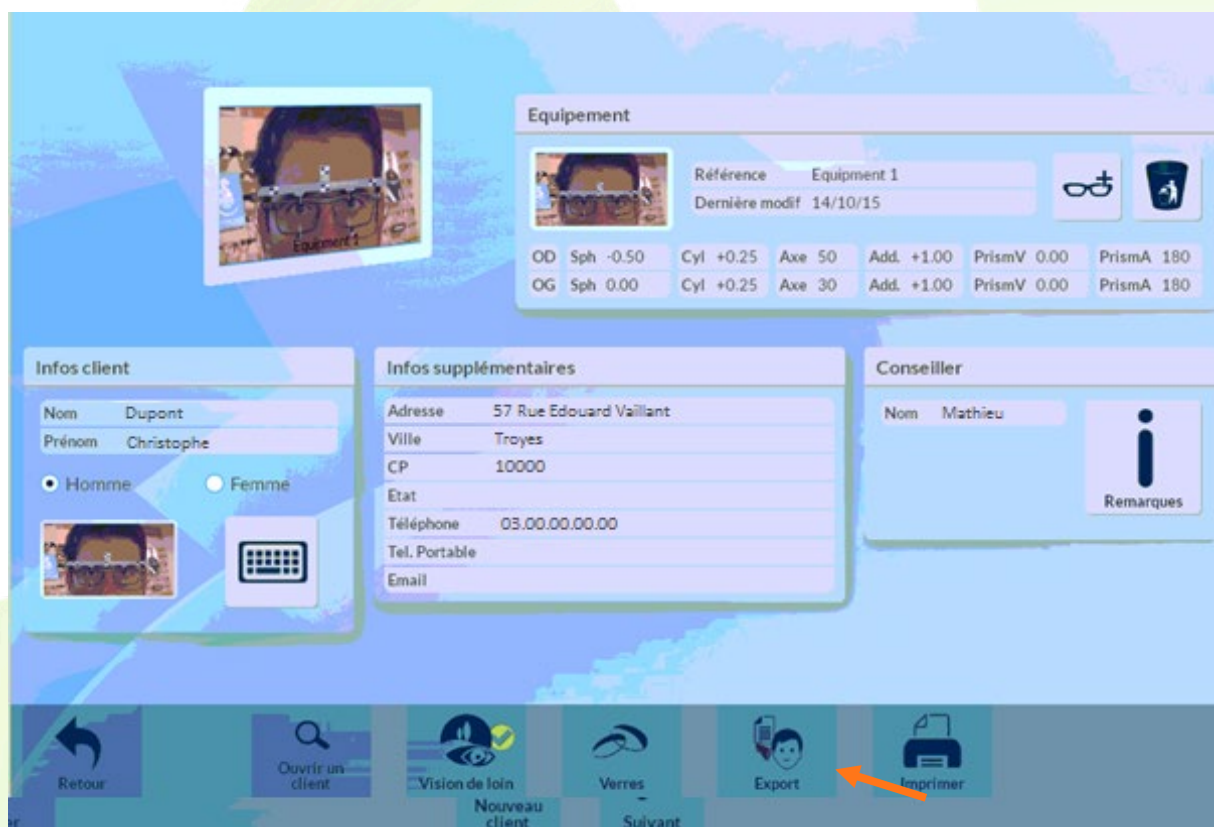

Cliquez sur le bouton Meo.



Le logiciel Expert 4 d'Activisu sera alors réduit et les données seront automatiquement intégrées à votre fiche client : le champ PDM/VSM indique ensuite que la prise de mesure a été réalisée via Activisu.

Type Équipement	Écarts & Hauteurs	Suivi & Traçabilité	Observations
NO - Nouvelle Ordonnance	32,8 34,0	☐ Monture : Non commandée	
MF - Multi-focaux	30,4 31,5	☐ Verres : Non commandés	
	24,6 24,0	Montage : Non planifié	
		Livr. : Prévenir	
		PDM/VSM : Activisu	

Monture									
Réf	Modèle	Fabricant	Fournisseur	Marque	Coloris	Ca	Ne	Type	PV Montur

Suppléments	
Cz F Prev	0,00
Total verre et supplément(s)	367,00

Activisu n'est pas un logiciel de commande, il faudra commander sous MyEasyOptic une fois l'interface sollicitée.

Si vous avez en complément Opsysweb, vous pouvez envisager plusieurs modes de fonctionnement :

- MyEasyOptic -> Activisu -> Opsysweb : commande via Opsysweb
- MyEasyOptic -> Activisu -> MyEasyOptic -> Opsysweb : commande via Opsysweb
- MyEasyOptic -> Opsysweb -> MyEasyOptic -> Activisu : commande via MyEasyOptic