

M

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Installation des Lecteurs Carte Vitale

VERSION 1.2025.7

MyEasyOptic



SOMMAIRE

I. Avertissement – Compatibilité des lecteurs Carte Vitale	3
II. Liste des lecteurs compatibles PCSC	3
III. Activation de l'option AreaFse	4
IV. Configuration du MyEasyLocalService	6
V. Installation AreaFse	6
VI. Paramétrage MyEasyOptic	7

I. Avertissement – Compatibilité des lecteurs Carte Vitale

Cette documentation n'est valable que pour les PC avec une version de Windows ayant encore le support de Microsoft. **Les versions de Windows obsolètes (Windows 10 et inférieures) ne pourront pas être dépannées en cas de souci.**

Pour pouvoir installer ou réinstaller un lecteur de carte vitale, il est essentiel de vérifier sa compatibilité avec les standards préconisés par la sécurité sociale. Seuls les lecteurs PCSC (Personal Computer/Smart Card) sont pris en charge.

Les anciens modèles fonctionnant en mode GALSS ou avec des pilotes propriétaires ne sont plus compatibles. Si vous en possédez encore, il sera nécessaire de remplacer le matériel par un lecteur compatible PCSC ou de faire évoluer votre lecteur si une mise à jour est possible.

II. Liste des lecteurs compatibles PCSC

Voici la liste des principaux modèles compatibles avec MyEasyOptic :


Modèle	Compatibilité NFC
SET2CLESS	✓ Oui
KAPLINK2	✓ Oui
TIKAP	✓ Oui
PRIUM 4 (version TLV5 et ultérieure)	✓ Oui
LITEO	✗ Non

Important : Cas particuliers

Si votre lecteur est un PRIUM 4 ou un Kaplink 2 fonctionnant encore en mode GALSS, il ne sera pas reconnu par MyEasyOptic. Une prestation d'installation de lecteur carte vitale est alors indispensable afin de le faire évoluer vers le mode PCSC, garantissant sa compatibilité et son bon fonctionnement.

III. Activation de l'option AreaFse

AreaFse est le programme permettant à MyEasyOptic de communiquer avec le lecteur de carte vitale. Pour vérifier si l'option AreaFse est active dans votre logiciel, vous devez aller dans **Paramètres > Périphériques** pour vérifier si l'onglet « Divers » est présent comme ci-dessous :

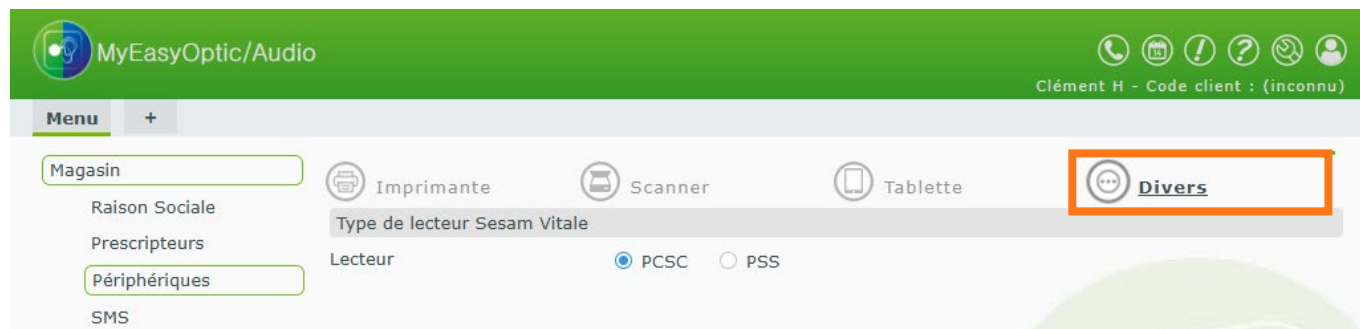

Si c'est le cas, vous pouvez passer au chapitre suivant de cette documentation.


Attention :

Si ce n'est pas le cas, vous devez activer l'option AreaFse mais :

- si vous avez des lecteurs de carte vitale sur d'autres postes, **ils cesseront de fonctionner** dès que vous cocherez l'option.
- **vous devez vérifier AVANT** de cocher l'option que tous les lecteurs présents en magasin sont compatibles PCSC.

En cas de doute, vous pouvez **contacter le support MyEasyOptic AVANT** d'activer l'option.

L'activation de l'option se fait via le menu « Administrateur » de MyEasyOptic, accessible en cliquant sur « Gérer les options » lors de la connexion :

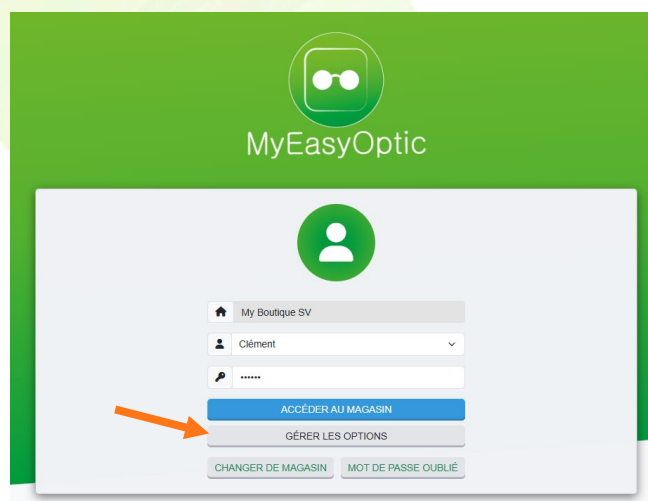

Cliquez ensuite sur **Options > Ajouter des options** et l'onglet **Autres options** : cochez la colonne « Sélectionner » de la ligne « Lecture CV AREAFSE (b2) » :

MyEasyOptic - GÉRER LES OPTIONS My Boutique SV - Sainte-Savine

Responsable magasin ▾ Magasin ▾ Utilisateurs ▾ **Options ▾** Jetons ▾ Factures ▾ Attestations ▾ RGD (2) ▾ [ACCÉDER À MYEASYOPTIC](#) Clément .

Accueil / Mes Options / Ajouter des Options Magasin sous abonnement / 0 / 9999999 / 0 / 106 / Illimités

[FSE/PEC](#) [SMS](#) [Formations](#) [Récupération de données](#) [Assistances](#) ***** Autres options**

AUTRES OPTIONS

Vous retrouverez ici les options diverses telles que l'option Stop Publicité, l'extension du nombre de fiches ou l'export de données.

Option	Périodicité	Prix	Sélectionner	Quantité	Renouveler
1 Demande accès Espace de stockage Illimité	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès Export Caisse	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 ABONNEMENT MYEASYOPTIC – 1 Utilisateur - 67€	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 ABONNEMENT MYEASYOPTIC – 2 Utilisateurs - 82€	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 ABONNEMENT MYEASYOPTIC – 3 Utilisateurs - 97€	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 ABONNEMENT MYEASYOPTIC – 4 Utilisateurs et plus	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Lecture CV AreaFSE(b2)		0 jeton	<input checked="" type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès Portail Multi-Magasin	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès Télétransmission SESAM-VITALE	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès appli carte Vitale - APCV	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès HOYAIOLOG	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>
1 Demande accès SEIKO	Mensuel	0 jeton	<input type="checkbox"/>	1 ▾	<input type="checkbox"/>

Dernières informations

- Nos tarifs évoluent en 2025, pour plus d'information cliquez ICI
- 18/11/2024 16:45
- Liaison avec NOTEZ-NOUS disponible :** Notez-Nous est l'outil qui manage votre réputation en ligne, rendez visible la satisfaction de vos clients !
- Pour plus d'info, contacter notre service commercial au 0820 888 195
- 07/06/2024 16:22
- Boostez votre présence en ligne avec un SITE INTERNET sur mesure !**
- Découvrez comment **CRISTALLIN** peut vous aider : vous démarquer et à attirer de nouveaux clients en **cliquant** ICI.
- 27/02/2024 11:46
- ASSISTANCE TELEPHONIQUE GOLD**
- Assistance téléphonique élargie : du lundi au vendredi


Puis validez en bas :

Jetons après transaction 0 jetons


[VALIDER LA TRANSACTION](#)

Vous devrez ensuite installer et configurer le programme AreaFse sur chaque poste ayant un lecteur de carte vitale.


IV. Configuration du MyEasyLocalService

Effectuez un clic droit sur l'icône MyEasyLocalService  dans la barre des tâches Windows et cliquez sur « Mise à jour » pour vérifier que vous avez la dernière version.

Ensuite, refaites à nouveau un clic droit sur l'icône MyEasyLocalService et choisissez « Configurer ».

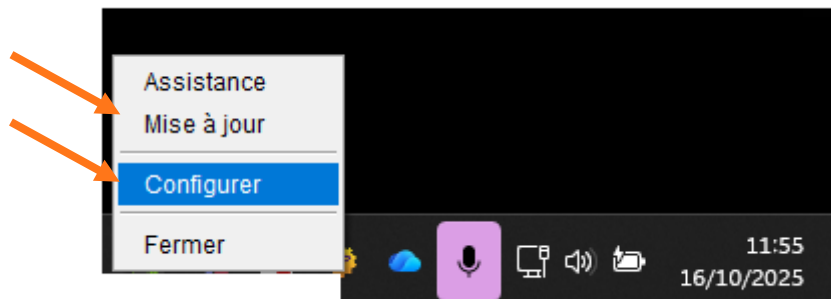


Ouvrez l'onglet SESAM-Vitale dans la fenêtre de configuration, cochez la case « Poste équipé d'un lecteur de carte CPS et Vitale », puis cliquez sur « Enregistrer ».

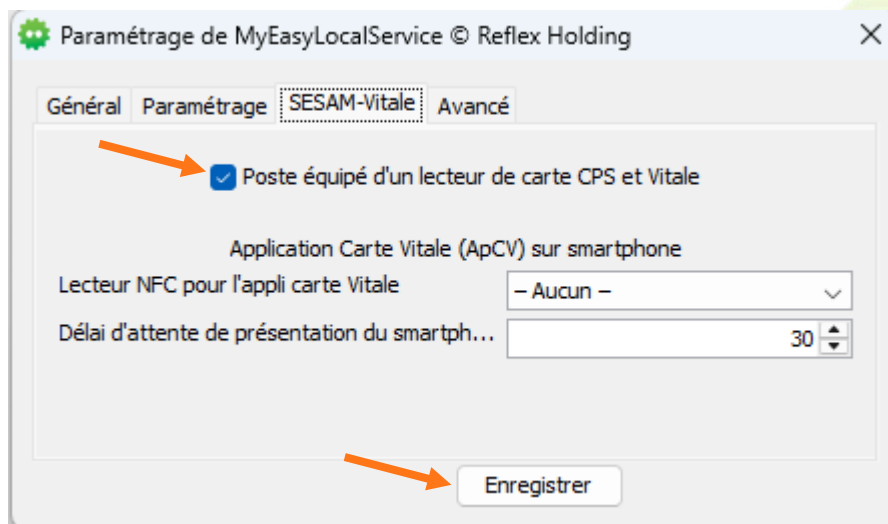


V. Installation AreaFse


Faites un clic droit sur l'icône MyEasyLocalService  :

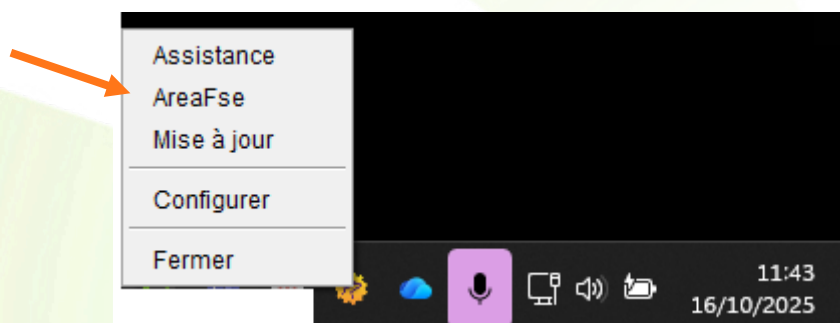


Sélectionnez « AreaFse » pour lancer l'installation si proposée puis cliquez sur « Oui ».

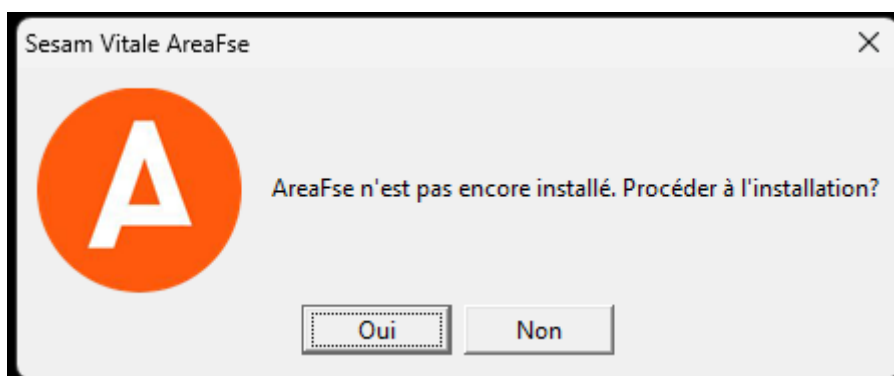

Attendez la fin du processus :

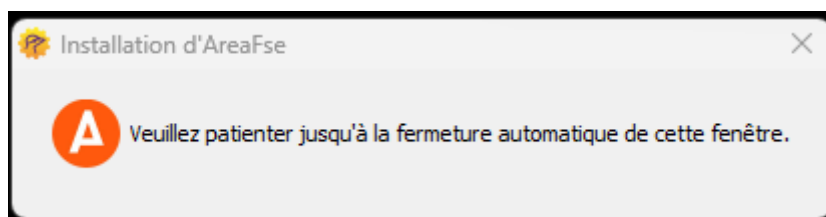

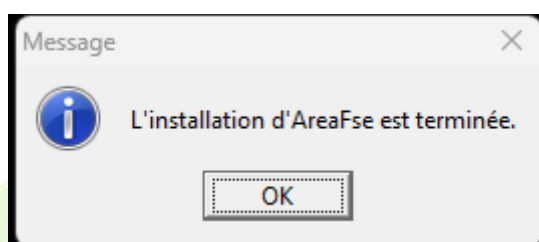

Validez avec OK :



VI. Paramétrage MyEasyOptic

Redémarrez le logiciel MyEasyOptic.

Cliquez sur **Paramètres** > **Magasin** > **Périphériques** puis sur l'onglet « Divers ».

Cochez la case PCSC pour activer le mode de communication standard puis validez vos paramètres en cliquant sur  ou sur  : votre lecteur est prêt à l'emploi.

